



4831 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden 'Original' met instrumenten

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden 'Original'
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen *Small*, *Medium* en *Large*
1 x Halo-carrouselhouder
1 x pincet
1 x tang

4832 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden 'Original'

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden 'Original'
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen *Small*, *Medium* en *Large*
1 x Halo-carrouselhouder

4835 - Halo sectioneel matrixsysteem
Miniset matrixbanden 'Original'

2 x van elk universele Halo-matrixringen
5 x van elk matrixbanden 'Original'
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
5 x van elk wiggen *Small*, *Medium* en *Large*
1 x Halo-carrouselhouder

4833 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden 'Firm' met coating van TeflonTM

2 x van elk universele Halo-matrixringen
20 x van elk matrixbanden 'Firm'
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen *Small*, *Medium* en *Large*
1 x Halo-carrouselhouder

4834 - Halo sectioneel matrixsysteem
Set matrixbanden 'Firm'

2 x van elk universele Halo-matrixringen
25 x van elk matrixbanden 'Firm'
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 7,5 mm
25 x van elk wiggen *Small*, *Medium* en *Large*
1 x Halo-carrouselhouder



Halo-matrixbanden 'Original'	50 st.	100 st.
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457



Halo-matrixbanden 'Firm'	50 st.	100 st.
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—



Halo-matrixbanden Firm' met coating van Teflon TM	50 st.	100 st.
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—



Halo-wiggen	100 st.
<i>Small</i>	5042
<i>Medium</i>	5043
<i>Large</i>	5044



Maat	1 st.	2 st.
Universeel	5008	5009


5048 - Halo-pincet 1 st.



5047 - Halo-tang 1 st.



HALOTM
SECTIONAL MATRIX SYSTEM

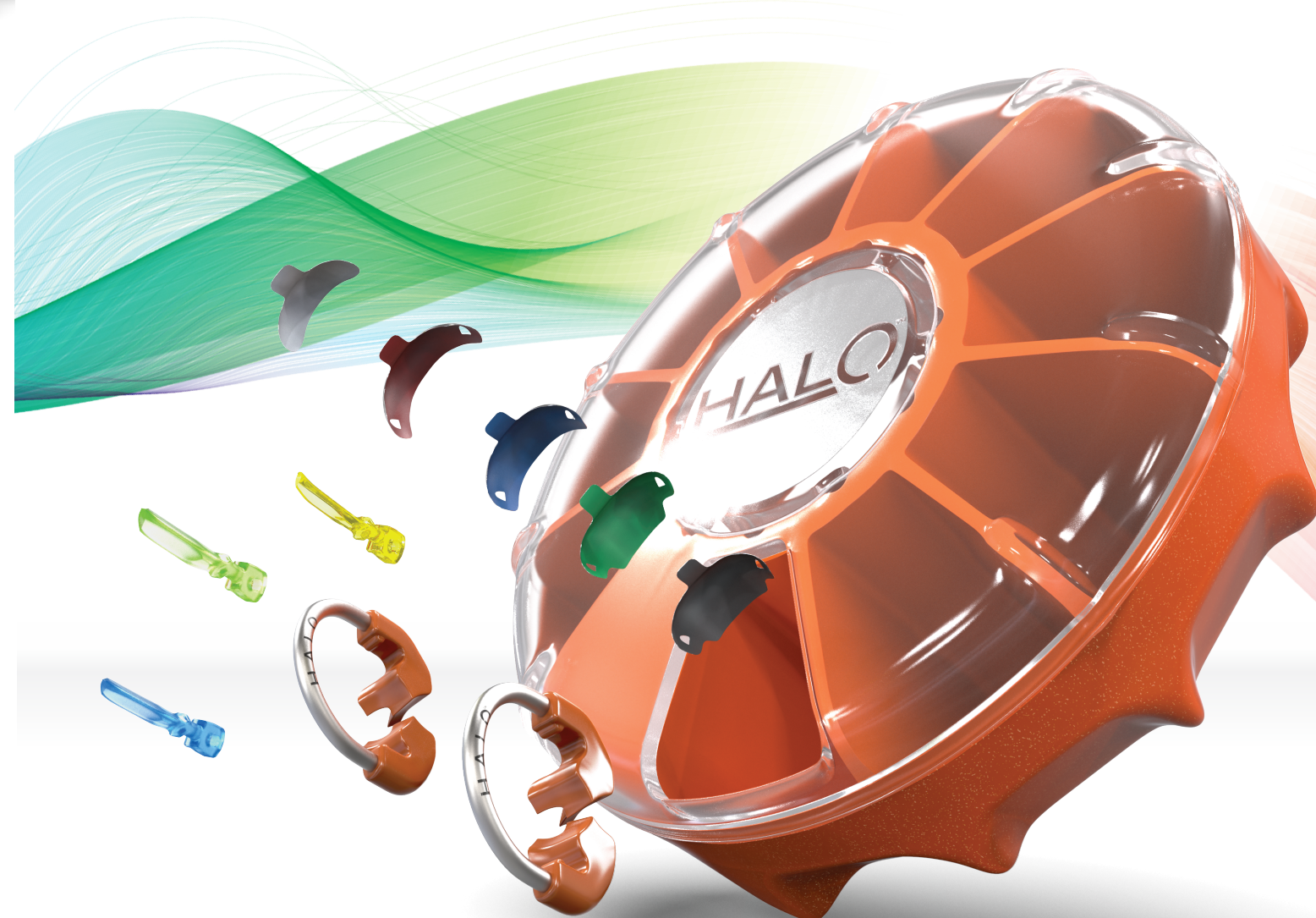

Prachtige resultaten
in minder tijd

Met het handzame
Halo sectioneel matrixsysteem kunt u in minder
tijd prachtige, anatomisch vormgegeven
composietrestauraties maken.

HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

Het Halo-systeem creëert anatomisch vormgegeven contouren, waardoor u minder tijd nodig heeft voor de vormgeving en afwerking van uw restauratie. Bovendien zorgt het systeem altijd voor nauwe contacten, waardoor uw restauraties de lange levensduur hebben die u en uw patiënt mogen verwachten.

Door de kracht van de NiTi-ring en het actieve wigeffect van de wiggen wordt maximale separatie van gebitselementen bereikt. Dit systeem zorgt voor ideale separatie, waardoor u een afzonderlijk gebitselement of meerdere buurelementen samen gemakkelijk kunt restaureren.

Door het unieke, bekvormige ontwerp van de Halo-ring kan de matrixband zich helemaal aan de preparatie aanpassen, vanaf de gingivarand tot aan de randlijst. Zo blijft de vorm behouden, zelfs bij grote preparaties, zodat u altijd anatomisch vormgegeven restauraties krijgt.

Als uw restauraties ideale contactpunten en een anatomische welving hebben, zult u merken dat u sneller kunt vormgeven en afwerken. En dat is nou precies wat het Halo-systeem bij elke restauratie doet.



Het Halo sectioneel matrixsysteem bestaat uit NiTi-ringen, roestvrijstalen matrixbanden en wiggen. Alle onderdelen zijn ontworpen om optimaal samen te werken; voor anatomisch vormgegeven restauraties van constante kwaliteit.



NITI-RINGEN

- Het superelastische NiTi (nikkel-titanium) behoudt tijdens ingrepen zijn kracht en vermindert cyclische vermoeiing
- Ringen gaan meer dan 1000 keer mee
- De glasgevulde nylon klemmen breken niet gemakkelijk en beïnvloeden de vorm van de preparatie niet, waardoor er geen verkeerd gecontourde restauraties kunnen ontstaan
- De ringcontouren zorgen dat de band wordt vastgezet op een natuurlijke, anatomische manier en helpen de vorming van overtollig materiaal te voorkomen waardoor u sneller klaar bent met afwerken
- Stapelbaar ontwerp voor gebruik bij MOD- en andere klasse II-restauraties
- Zorgt voor goede separatie bij restauraties van buurelementen



MATRIXBANDEN

- Anatomisch vormgegeven, voor ideale contactpunten
- De ronding bij de randlijst zorgt voor ideale proximale ruimten bij het occlusale vlak
- Pincetopeningen voor eenvoudig aanbrengen
- Buigbaar lipje voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen en betere zichtbaarheid
- Optionele coating voor gemakkelijk herkennen (tefloncoating met een dikte van 0,013 mm)
- De originele matrixbanden (Original) passen zich beter aan en zorgen ervoor dat u uw restauraties gemakkelijker kunt polijsten. De stevige matrixbanden (Firm) zijn goed bestand tegen vervorming en ideaal voor nauwe proximale ruimten
- De originele en stevige matrixbanden zijn gemaakt van ultradun roestvrij staal van 0,038 mm



WIGGEN

- Stevige wiggen zorgen voor een actief wigeffect, voor betere separatie, maar met minder trauma aan de papillen
- Doordat ze hol zijn, kunnen de wiggen gemakkelijk worden aangebracht en gestapeld als er meerdere exemplaren nodig zijn
- Duidelijke kleuren om het formaat van de wiggen goed te herkennen
- Flexibel middengedeelte voor anatomische adaptatie van de matrixband



CARROUSELHOUDER

- Alles goed op orde met de unieke, handzame carouselhouder
- Matrixbanden en wiggen vliegen niet alle kanten op als de houder per ongeluk valt; dat scheelt tijd en frustratie
- Gemakkelijk te desinfecteren door wisdesinfectie van het oppervlak