





ART³: EEN NIEUWE MANIER VAN BULKVULLEN

Realiseer levensechte restauraties met de volgende generatie van de klinisch beproefde Adaptive Response Technology (ART), die ook in Harmonize™ en SimpliShade Universal Composite wordt gebruikt. Dankzij de kracht van de verbeterde Adaptive Response Technology, biedt SimpliShade Bulk Fill gemakkelijke hantering en lage krimp.

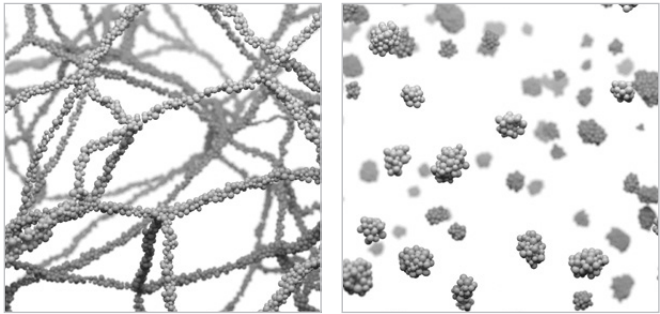

Adaptieve rheologische responstechnologie, voor gemakkelijk vormgeven

ART³ maakt gebruik van rheologische modificatoren die de viscositeit van het composiet verminderen als u deze beweegt. Als u klaar bent met vormgeven, herstelt de viscositeit zich en stabiliseert zich de anatomie voor de lichtuitharding plaatsvindt — zo is opnieuw vormgeven minder vaak nodig.

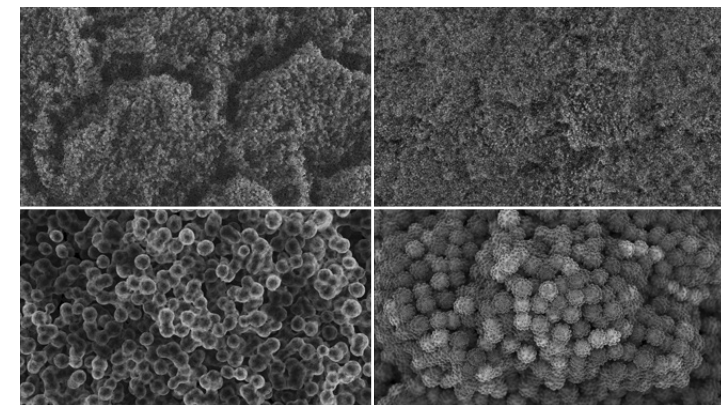

Menselijk glazuur

SimpliShade Bulk Fill

Adaptieve krimpbelastingsresponstechnologie, voor resultaten met een lange levensduur

Tijdens de polymerisatie benut SimpliShade Bulk Fill de voordelen van een kunststof met lage krimp en een innovatief ontwerp met nanovulmiddelen, waarbij in kunststof ingebedde nanovulmaterialen de elasticiteit vergroten en zo de belasting beperken en een speciale coating de onderlinge spanning tussen de bestanddelen vermindert. Door het samenbrengen van drie manieren om de krimpbelasting te verminderen wordt de marginale adaptatie en integriteit vergroot - door vermindering van de spanning die de composietrestauratie op de adhesieflaag uitoefent.



Lees meer over ART³ en de uitwerking op de krimpbelasting

Bestelinformatie



SimpliShade Bulk Fill

Artikel-nummer	Artikel Omschrijving
37211	SimpliShade Bulk Fill Composite in spuit
37212	SimpliShade Bulk Fill Composite in Unidose-verpakking van 20 stuks

KIES VOOR EENVOUD

met ons volledige assortiment SimpliShade producten!



SimpliShade Bulk Fill Flow

Artikel-nummer	Artikel Omschrijving
37217	SimpliShade Bulk Fill Flow in spuit
37218	SimpliShade Bulk Fill Flow in Unidose-verpakking van 20 stuks



SimpliShade Universal Composite

Unidose		Spuit	
Artikel-nummer	Artikel Omschrijving	Artikel-nummer	Artikel Omschrijving
37006	Light - 20 stuks	37001	Light
37007	Medium - 20 stuks	37002	Medium
37008	Dark - 10 stuks	37003	Dark
37009	Bleach White - 10 stuks	37004	Bleach White
37010	Universal Opaque - 10 stuks	37005	Universal Opaque



Gebruik voor een afwerking met ultrahoge glans de polijstinstrumenten van Kerr!



Scan de QR-code voor meer informatie, of ga naar go.kerrdental.com/simplishadebulkfill

Eén kleurtint. Eén stap. Een betere manier van bulkvullen.

SimpliShade™ BULK FILL



Eenvoud met één kleur in één stap

Prachtige restauraties, maar dan nog wat eenvoudiger: met SimpliShade™ Bulk Fill. U kunt de afdeklaag overslaan door aanbrengen in één stap en met slechts één kleurtint voor alle 16 klassieke VITA-kleurtinten verlaagt u tevens uw voorraad. Dankzij de kracht van de ternaire Adaptive Response Technology (ART³) biedt SimpliShade Bulk Fill gemakkelijke hantering en lage krimpbelasting.

kerrdental.com

©2023 Kerr Corporation. SimpliShade en Harmonize zijn handelsmerken van Kerr Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren. Gegevens bij ons in het archief. MKT-22-0879-NL

Kerr™

Kerr™

ÉÉN KLEUR, MEER IS NIET NODIG

Zo krijgt u de adapteerbaarheid, levensduur, uithardingsdiepte en eenvoud die u wilt: met SimpliShade Bulk Fill.

SimpliShade™ Bulk Fill is geïndiceerd voor restauraties in klasse I-V – directe plaatsing van anterieure en posterieure restauraties, stompopbouw en het repareren van defecte restauraties.



Systeem in één kleurtint

Door het gebruik van één kleurtint die zich naadloos aanpast aan alle 16 klassieke VITA®-kleurtinten, bespaart SimpliShade Bulk Fill u de tijd van het kiezen van de juiste kleurtint en het voorraadbeheer.



Eén stap

Aanbrengen van een afdeklaag is niet meer nodig, volledige restauraties met behulp een SingleFill™-composietmateriaal. Door de verbeterde uitharding maakt SimpliShade Bulk Fill het eenvoudig om in slechts één enkele stap tot een polymerisatiediepte van wel 5 mm te komen.



Eenvoud en lange levensduur

SimpliShade Bulk Fill biedt lagere slijtagewaarden, meer buigsterkte en een vergelijkbare krimpbelasting als andere merken bulkvulmaterialen die verkrijgbaar zijn, waardoor uw restauraties sterker zijn en een langere levensduur hebben.





Kameleoneffect

Door de speciale architectuur met nanovulmiddelen wordt de structuur van natuurlijk glazuur nagebootst en zorgt de interactie met licht voor een vrijwel niet te onderscheiden kleuraanpassing.

Buigsterkte

SimpliShade Bulk Fill heeft in vergelijking met Concurrent 1 en Concurrent 2 een vergelijkbare of hogere buigsterkte en is daardoor in de loop der tijd beter bestand tegen chipping en breuk.

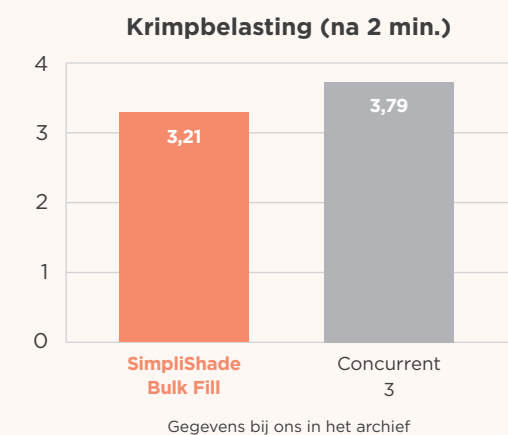
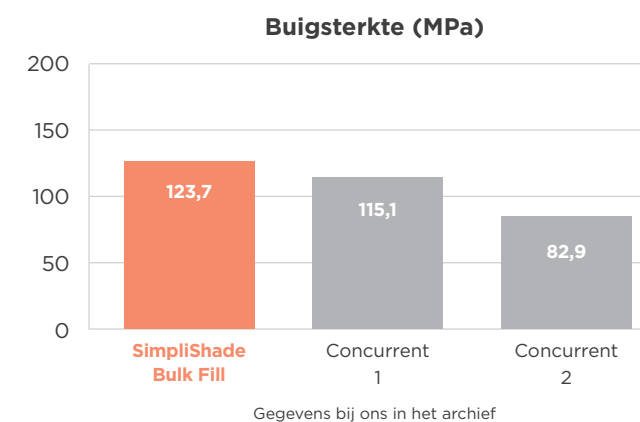


Krimpbelasting

SimpliShade Bulk Fill heeft een vergelijkbare krimpbelasting als Concurrent 3, waardoor de marginale afbraak en postoperatieve gevoeligheid verminderen, voor een restauratie met een langere levensduur.

Slijtagewaarde

SimpliShade Bulk Fill heeft in vergelijking met Concurrent 3, Concurrent 1, en Concurrent 2 relatief gezien de laagste slijtagewaarde. Een lage slijtagewaarde zorgt dat een restauratie de dagelijkse krachten van kauwen, poetsen en andere verschijnselen beter kan weerstaan.

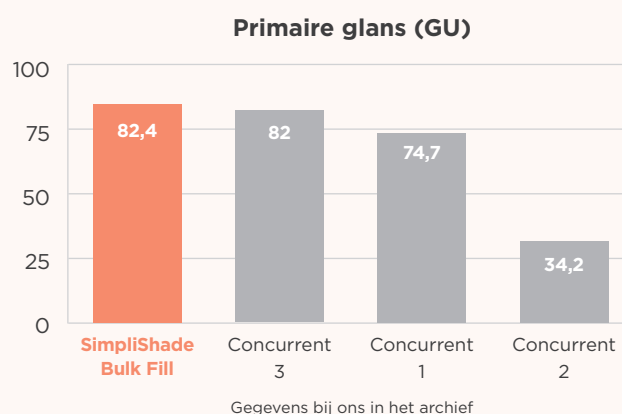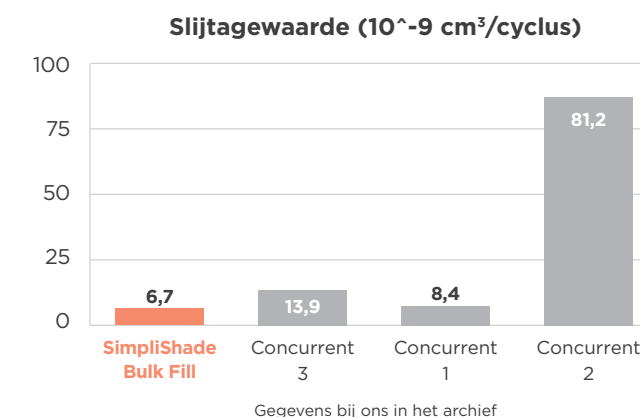


Primaire glans

SimpliShade Bulk Fill heeft een vergelijkbare primaire glans als Concurrent 3 en een hogere primaire glans dan Concurrent 1 en Concurrent 2, wat resulteert in een esthetischere restauratie.




Hanteringseigenschappen

Adaptieve rheologische responstechnologie vermindert de viscositeit tijdens het bewegen, voor gemakkelijk vormgeven en creëren van de anatomie.

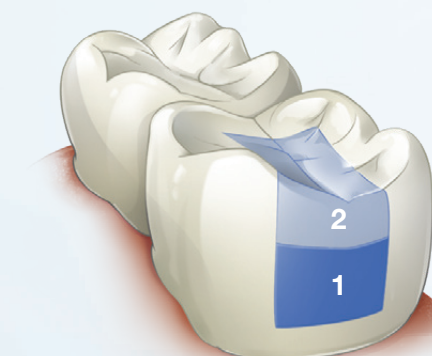

Bij gebruik van vloeibaar composietmateriaal (1) en afwerking met SimpliShade Bulk Fill (2)

Zorg voor een betere verzegeling en adaptatie door toepassing van een vloeibare composiet als onderlaag in de caviteit (tot 2 mm). Vul de caviteit daarna eenvoudig en zonder inspanning op met SimpliShade BF, tot een laag van 5 mm.

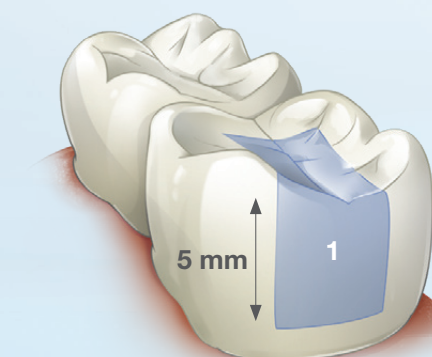

Alleen gebruik van Bulk Fill voor 5 mm

SimpliShade BF vult de caviteit daarna eenvoudig en zonder inspanning tot een laag van 5 mm.