




AVEC **FUTAR**[®],
C'EST LE TOOOOP

ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION

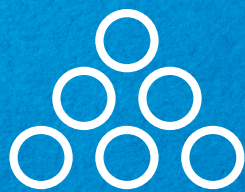

KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

FUTAR® – TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT !

Enregistrement de l'occlusion

La famille de produits **Futar®** comprend six matériaux de prise d'empreinte différents à base de silicone A pour l'enregistrement précis des rapports d'occlusion.

SUPER QUALITÉ ET PROGRÈS

- « Made in Germany » avec la recherche, le développement et la production réalisés en Allemagne

SUPER POLYVALENCE

- Choisissez une dureté finale élevée ou maximale de même que différentes durées de préparation !

SUPER DEPUIS PLUS DE 20 ANS

- Faites confiance au leader du marché en Allemagne* !

Ne faites aucun compromis pour votre enregistrement de l'occlusion !



FUTAR® – VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

Futar® Cut & Trim Fast :

- Économique grâce à l'utilisation d'un **embout mélangeur jaune plus court** (jusqu'à trois enregistrements de plus par cartouche)
- Dureté finale ultra-élevée (Shore-D 35)
- Idéal à travailler avec des fraises et/ou un scalpel
- Scannable pour l'utilisation en CFAO dans votre cabinet !



Futar® D / Futar® D Fast :

- Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- Excellente usinabilité
- Aussi disponible en variante Fast : **pour un plus grand confort du patient !**



La gamme Futar® peut
bien plus encore :

Futar® / Futar® Fast :

- Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- Dureté dans la prise, flexible dans l'usinage : facile à découper
- Aussi disponible en variante Fast : **pour un plus grand confort du patient !**



Futar® D Slow :

- Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- Durée de préparation extra-longue pour les applications longues, comme l'enregistrement de l'occlusion myocentrique, la fixation de piliers d'empreinte ou le façonnage personnalisé des bords
- Utilisation polyvalente en laboratoire aussi : comme matériau isolant ou pour la réalisation de segments de modèle










- Précision du résultat grâce aux excellentes propriétés viscoélastiques
- La faible élasticité empêche l'effet de ressort lors de l'articulation du modèle
- Élimination aisée des excédents par rupture

**UTILISATION
SIMPLE, PROPRE
ET RAPIDE !**








FUTAR® – LES PERFORMANCES

Arcade dentaire

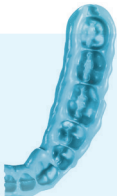 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange				 Dureté (env.) Shore
		Durée de préparation à 23 °C	Durée de mise en bouche	Durée totale de la prise*	
Futar®		30 s	90 s	02:00 min	A 90
Futar® D		30 s	90 s	02:00 min	D 43
Futar® D Slow		90 s	03:00 min	04:30 min	D 43

* Durée totale de la prise (retrait de la bouche) depuis le début du mélange.

Segment

 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange				 Dureté (env.) Shore
		Durée de préparation à 23 °C	Durée de mise en bouche	Durée totale de la prise*	
Futar® Fast		15 s	45 s	01:00 min	A 90
Futar® D Fast		15 s	45 s	01:00 min	D 43
Futar® Cut & Trim Fast		15 s	45 s	01:00 min	D 35

* Durée totale de la prise (retrait de la bouche) depuis le début du mélange.

**CRÉEZ
VOTRE EN-
REGISTREMENT
DE L'OCCLUSION
EN UNE SEULE
MINUTE !**

FUTAR® – LA GAMME

Futar®	Futar® Fast	Futar® D	Futar® D Fast
Intro pack	Cartouche de 50 ml, 6 embouts mélangeurs verts		
Normal pack	2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs verts		
Bonus pack	10 cartouches de 50 ml, 30 embouts mélangeurs verts		

Futar® Cut & Trim Fast	
Intro pack	Cartouche de 50 ml, 8 embouts mélangeurs jaunes
Normal pack	2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs jaunes
Bonus pack	10 cartouches de 50 ml, 40 embouts mélangeurs jaunes

Futar® D Slow	
Normal pack	2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs verts



Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines France
Téléphone : 0387288616
0387288617
info@kettenbach.com
www.kettenbach.fr


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

032786_1519

