




SafeJet™

Embout jetable pour seringue multifonctionnelle

Embouts hygiéniques à usage unique pour seringue multifonctionnelle. Ils conviennent par une séparation fiable de l'air et de l'eau et une fixation sûre à la seringue. Compatibles avec tous les adaptateurs SafeJet™, Pro-Tip® et Pro-Tip® Turbo*.




*PRO-TIP et PRO-TIP TURBO sont des marques déposées d'ASTEK INNOVATIONS LIMITED. Les produits de Medicom ne sont pas soutenus par Astek, ne sont pas directement associés à Astek, ne sont pas entretenus, approuvés ou sponsorisés par Astek.

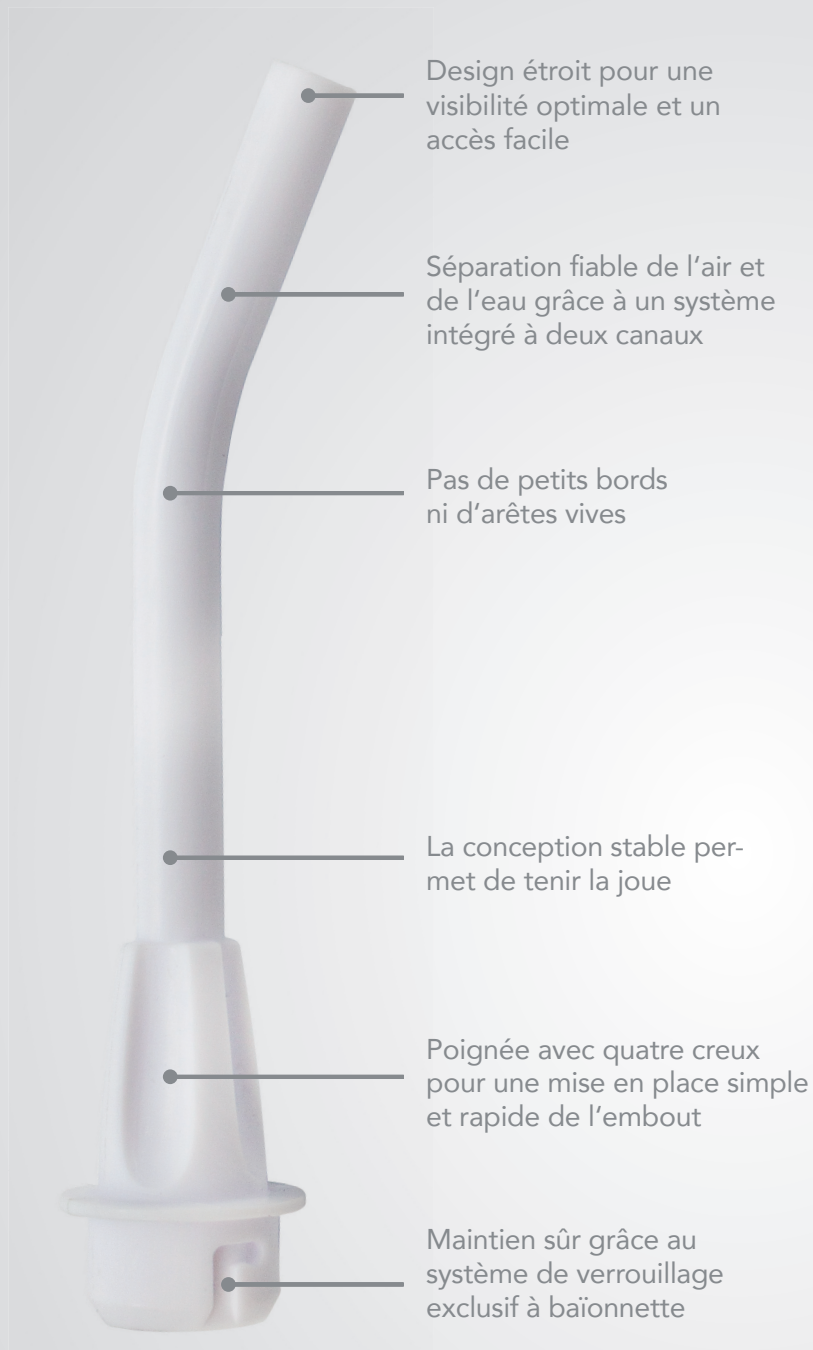


Système à deux canaux

Les canules SafeJet™ ont deux canaux distincts permettant à la fois un flux d'air propre et sec, un jet d'eau précis et une fonction de vaporisation uniforme.

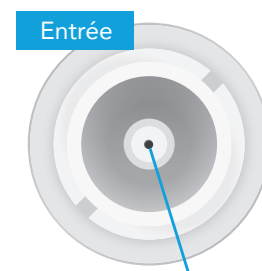

Connexion directe au canal d'eau central de l'adaptateur

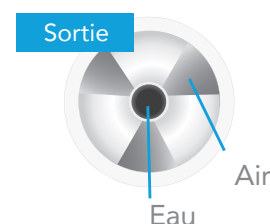

Facile à assembler



Placer l'embout sur l'adaptateur en approchant la rainure de fermeture à baïonnette à la hauteur des points de marquage.



Et pour fixer l'embout, tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre - Et c'est prêt !



Medicom
SafeJet™ embouts à usage unique

MD Class IIa
Contenu : 250 pièces
Couleur : blanc
No art. : 1007074